

Traducción no oficial del prospecto en alemán

PROSPECTO - ¡Leer con atención!



**MediGel®**

## **CICATRIZACIÓN RÁPIDA DE LAS HERIDAS**

Gel lipídico hidroactivo con cinc y hierro para el tratamiento de heridas agudas y crónicas

### **Uso previsto**

MediGel® Cicatrización Rápida de Heridas es un gel lipídico para el tratamiento tópico de las heridas agudas (p. ej. rozaduras, cortes, arañazos, mordeduras, desgarros, laceraciones) y quemaduras de 1<sup>er</sup> y 2<sup>o</sup> grado (formación de ampollas), así como quemaduras solares. MediGel® Cicatrización Rápida de Heridas también se puede aplicar en heridas crónicas no infectadas limpias y con exudación moderada (decúbito de segundo grado); en este caso solo bajo supervisión médica.

\* En las mordeduras es imprescindible acudir al médico para el primer tratamiento por el alto riesgo de infección.

### **Propiedades**

MediGel® Cicatrización Rápida de Heridas es un gel lipídico blanco inodoro con propiedades hidroactivas que combina la capacidad hidratante del gel con el efecto nutritivo de una crema. Está indicado para el uso en heridas secas o con una exudación moderada. MediGel® Cicatrización Rápida de Heridas aplica los principios para la cura húmeda de las heridas para la óptima cicatrización\* de la piel lesionada. El bajo valor del pH, favorecido por la ausencia de iones de cinc y de hierro, activa el proceso natural de la cicatrización e inicia la formación de tejido nuevo. Los aceites

nutritivos naturales y la vitamina E favorecen la regeneración de la piel dañada. MediGel® Cicatrización Rápida de Heridas es muy bien tolerado y, por eso, está indicado para toda la familia, también para los niños y para la piel sensible.

Gracias a las propiedades físicas de la crema, MediGel® Cicatrización Rápida de Heridas crea las condiciones óptimas para la rápida cicatrización de las heridas:

- alivio rápido del dolor y sensación refrescante
- restablecimiento de un microclima adecuado en la herida
- fomenta la cicatrización de las heridas
- reduce la hinchazón
- minimiza el riesgo de infección
- reduce la formación de cicatrices

### **Instrucciones para la aplicación**

Lávese las manos antes y después de tratar una herida. Antes del tratamiento con MediGel® Cicatrización Rápida de Heridas es preciso limpiar bien la herida. Aplique una capa de MediGel® Cicatrización Rápida de Heridas de unos 2 mm de espesor sobre la herida limpia y sobre los bordes (las heridas cicatrizan desde fuera hacia dentro). Durante los primeros días MediGel® Cicatrización Rápida de Heridas puede aplicarse varias veces al día.

El gel se puede usar en todas las fases de la cicatrización hasta la curación completa. Asegúrese de que extrae el gel del tubo de una manera higiénica. El orificio del tubo no debe entrar en contacto con la herida.


Recomendamos usar MediGel® Cicatrización Rápida de Heridas en combinación con un apósito convencional o con una venda para proteger aún más la herida.

Heridas crónicas no infectadas y con exudación moderada (decúbito de segundo grado): la aplicación solo debe realizarse bajo supervisión médica.

MediGel® Cicatrización Rápida de Heridas no contiene sustancias irritantes para la piel y puede usarse en la zona de la mucosa (p. ej. la nariz) y alrededor de la boca.




Limpiar

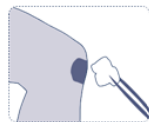

Secar



Aplicar

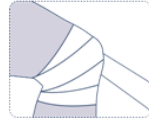

Cubrir

## Precauciones

- MediGel® Cicatrización Rápida de Heridas sólo está previsto para el uso tópico y no se debe ingerir.
- No usar en caso de hipersensibilidad conocida a alguno de sus componentes. Interrumpa el uso del gel lipídico si se produce una reacción alérgica (erupción cutánea). Elimine bien el gel lipídico con agua y acuda al médico.
- No aplicar MediGel® Cicatrización Rápida de Heridas en los párpados ni en los ojos. Si MediGel® entra en contacto con los ojos lávelos con agua corriente y acuda al médico.
- No combinar MediGel® Cicatrización Rápida de Heridas con productos que contengan plata ni con vendajes oclusivos.
- En el caso de heridas muy extensas, muy exudativas o infectadas consulte a su médico antes de usar MediGel® Cicatrización Rápida de Heridas, porque puede ser necesario un tratamiento adicional.
- Consulte al médico si la herida se enrojece, duele o se inflama, o si la cicatrización no se inicia transcurridos unos días desde la aplicación del gel.
- Si está embarazada o en periodo de lactancia consulte a su médico antes de usar MediGel® Cicatrización Rápida de Heridas.

## Interacciones

El producto no se debe combinar con otras cremas o pomadas.

## Efectos adversos

Consulte las posibles reacciones alérgicas en la sección «Precauciones». Si experimenta efectos adversos informe a su farmacéutico o al fabricante.

## Conservación

- ¡Proteger de la congelación y del calor! Conserve el gel lipídico en un lugar seco y en su envase original. No conservar por debajo de 5 °C ni a más de 30 °C.
- Cierre el tubo después del uso. Para ello utilice solamente el tapón original.
- No use MediGel® Cicatrización Rápida de Heridas después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- Caducidad:
  - 3 años desde la fabricación (tubo)
  - 2 años desde la fabricación (sobre)
- Periodo de validez: 90 días después de la apertura (tubo)
  - Para un solo uso (sobre)
- No utilice el producto si el tubo está dañado. Compruebe que el sellado está intacto.
- Mantener MediGel® Cicatrización Rápida de Heridas fuera de la vista y del alcance de los niños.

## Componentes







Solución de oligoelementos (agua dest, cinc, hierro), octildodecanol, glicéridos de palma hidrogenados, PEG-200 palmitato de glicerilo hidrogenado, alcohol cetílico, fosfato de almidón hidroxipropilado, tocoferol, alcohol bencílico, metilcloroisotiazolinona, polihexanida, sílice

## Tamaños de envase

Tubos de 5 g, 10 g, 20 g y 50 g y sobre de 2 g. Es posible que no se comercialicen todos los tamaños de envase.

Fecha de la información: mayo 2017

## Explicación de los símbolos de la caja

-  Tener en cuenta el prospecto
-  Fecha de caducidad
-  Código de lote
-  Producto sanitario
-  No usar si el tubo está dañado
-  Límite de temperatura



Fabricante



Para un solo uso (sobre de 2 g)

REV 052017

Fabricante

MEDICE Arzneimittel

Pütter GmbH & Co. KG

Kuhloweg 37

D-58638 Iserlohn

Teléfono: +49 (0) 2371 937-0

Fax: +49 (0) 2371 937-329

Correo electrónico: [info@medice.de](mailto:info@medice.de)

[www.medice.de](http://www.medice.de)