

Almanca dilindeki kullanma talimatının resmi olmayan tercümesi

KULLANMA TALİMATI - Lütfen dikkatle okuyunuz!



MediGel®

HIZLI YARA İYİLEŞTİRİCİ

Akut ve kronik yaraların tedavisi için çinko ve demir içeren hidroaktif lipojel.

Kullanım amacı

MediGel® Hızlı Yara İyileştirici, akut yaralar (ör. sıyrık, kesik, çizik ve ısırık yaraları* ile yırtılma ve çatlama yaraları), 1 ve 2. derecede yanıklar (kabarcık oluşumu) ile güneş yanıklarının haricen tedavisi için kullanılan bir lipojeldir. MediGel® Hızlı Yara İyileştirici ayrıca temizlenmiş, fazla ıslanmayan, enfekte olmamış kronik yaralarda (2. derede dekübitüs) - burada sadece tıbbi uzman personel gözetiminde - kullanılabilir.

* Isırık yaralarında yüksek enfeksiyon riski nedeniyle ilk tedavi için mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Özellikler

MediGel Hızlı Yara İyileştirici jelin nemlendirici özelliklerini kremin bakım yapan özellikleri ile birleştiren, hidroaktif özelliğe sahip, beyaz, kokusuz bir lipojeldir. Kuru ve az eksudalı yaralarda kullanılmaya uygundur. MediGel® Hızlı Yara İyileştirici, yaranın ıslak pansumanla iyileştirilmesi prensibini yaralı derinin optimal iyileşmesi* için birçok açıdan karşılar. Çinko ve demir iyonlarının varlığı ile desteklenen düşük pH değeri doğal yara iyileşme sürecini aktive eder yeni doku oluşumunu başlatır. Doğal bakım yapan yağlar ve E vitamini zarar görmüş derinin yenilenmesini destekler. MediGel® Hızlı Yara İyileştirici çok iyi tolere edilir ve bu sayede çocuklar da dahil olmak üzere tüm aile fertleri tarafından kullanılabilir, ayrıca hassas ciltler için de uygundur.

MediGel® Hızlı Yara İyileştirici, kremin fiziksel özellikleri sayesinde yaranın hızla iyileşmesi için gereken şu koşulları oluşturur*:

- Hızlı ağrı kesme ve soğutma
- Yarada yeniden uygun bir mikro klima yaratır
- Yaranın iyileşmesini destekler
- Şişkinliği azaltır
- Enfeksiyon riskini azaltır
- Yara izi oluşumunu azaltır

Kullanım bilgileri

Bir yarayı tedavi etme öncesinde ve sonrasında ellerinizi yıkayınız. Yara MediGel® Hızlı Yara İyileştirici ile tedavi edilmeden önce özenle temizlenmelidir. MediGel® Hızlı Yara İyileştirici'yi temizlenmiş yaranın üzerine, kenarlarını da içine alacak şekilde, yaklaşık 2 mm kalınlığında bir tabaka halinde sürünüz (yaralar dıştan içe doğru iyileşir). MediGel® Hızlı Yara İyileştirici yaralanmanın ilk günlerinde günde bir kaç kez sürülebilir.

Uygulama yara tamamen iyileşene kadar iyileşme sürecinin her aşamasında yapılabilir. Tüp içeriğini tüpün ağzını yaraya değdirmeden hijyenik bir biçimde almaya özen gösteriniz.

Yaraya ilave koruma sağlamak açısından MediGel® Hızlı Yara İyileştirici'yi piyasada satılan bir flaster veya sargı bezi kullanarak uygulamanızı öneririz.

Fazla ıslanmayan, enfekte olmamış kronik yaralarda (2. derede dekübitüs):

Uygulama sadece tıbbi gözetim altında yapılmalıdır.

MediGel® Hızlı Yara İyileştirici cildi tahriş edici maddeler içermez ve mukoza alanı (ör. burun) veya ağızda uygulanabilir.




Temizleyin



Kurulayın



Sürün

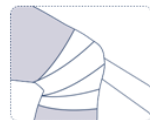

Örtün

Önlemler

- MediGel® Hızlı Yara İyileştirici haricen kullanılmak için öngörölmüş olup ağızdan alınmaz.
- İçerdiği maddelerden birine karşı bilinen bir aşırı hassasiyet olması durumunda uygulanmamalıdır. Allerjik bir reaksiyon göröldüğünde (deride döküntü) lipojeli kullanmaya son veriniz. Böyle bir durumda lipojeli suyla iyice yıkayınız ve bir doktora başvurunuz
- MediGel® Hızlı Yara İyileştirici'yi göz kapaklarına ve gözlere uygulamayınız. MediGel®'in gözle temas etmesi halinde gözlerinizi akan suyla yıkayınız ve bir doktora başvurunuz.
- MediGel® Hızlı Yara İyileştirici'yi gümüş içeren ürünlerle veya örtücü sargı malzemeleriyle birlikte kullanmayınız.
- Çok büyük ve çok eksudalı veya enfekte olmuş yaralarda duruma göre ek bir tedavi gerekeceğinden MediGel® Hızlı Yara İyileştiriciyi kullanmadan önce bir doktora danışmalısınız.
- Yara kızarır, ağrır veya şişerse ya da bir kaç gün içerisinde yarada iyileşme görölmezse, bir doktora başvurmalısınız.
- Gebeymeniz veya emziriyorsanız, MediGel®'Hızlı Yara İyileştirici'yi yalnızca doktorunuza danıştıktan sonra uygulamalısınız.

Etkileşimler

Ürün başka kremlerle veya merhemlerle bir arada kullanılmamalıdır.

Yan etkiler

Olası allerjik reaksiyonlar için "Önlemler" bölümüne bakınız. Kendinizde yan etkiler oluştuğunu fark ederseniz, lütfen bunları eczacınıza veya üretici firma ile paylaşınız.

Saklama talimatı

- Donmaya ve sıcağa karşı koruyunuz! Lipojeli kuru bir yerde orijinal ambalajında, sıcaklık 5°C'nin altında ve 30°C'nin üstünde olmayacak şekilde saklayınız.
- Kullandıktan sonra tüpün kapağını kapatınız. Bunun için lütfen orijinal kapağı kullanınız.
- MediGel®'Hızlı Yara İyileştirici'yi ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
- Raf ömrü:

Üretim tarihinden itibaren 3 yıl (tüp)

Üretim tarihinden itibaren 2 yıl (saşe)

- Saklama süresi: Açıldıktan sonra 90 gün (tüp)

Tek kullanımlıktır (saşe)

- Lütfen hasarlı tüpleri kullanmayınız. Tüpün ağzındaki mührün hasar görmemiş olmasına dikkat ediniz.

- MediGel® Hızlı Yara İyileştirici çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklanmalıdır!

Bileşenleri

Eser element çözeltisi (distile su, çinko, demir), oktil dodekanol, hidrojenize palmiye gliseridleri, PEG-200 hidrojenize gliseril palmitat, setil alkol, hidroksipropil nişasta fosfat, tokoferol, benzil alkol, metilkloroizotiazolinon, poliheksanid, silika

Ambalaj boyları

5 g, 10 g, 20 g ve 50 g tüpler ve 2 g saşe. Tüm ambalaj büyüklükleri muhtemelen piyasada bulunmayabilir.


Bilgi güncelliği: Mayıs 2017

Dış kartonun üzerindeki sembollerin açıklaması

 Kullanma talimatını dikkate alın

 Son kullanma tarihi

 Parti tanımı

 Tıbbi ürün

 Hasarlı tüpleri kullanmayın

 Sıcaklık sınırları

 Üretici firma

 Tek kullanımlıktır (2 g saşe)

REVİZYON 052017

Üretici firma

MEDICE Arzneimittel

Pütter GmbH & Co. KG

Kuhloweg 37

D-58638 Iserlohn, Almanya

Telefon: +49 (0) 2371 937-0

Faks: +49 (0) 2371 937-329

E-Posta: info@medice.de

www.medice.de